

A photograph of two women sitting on the grass at the base of a large tree. The woman on the left is younger, with long brown hair, wearing a blue short-sleeved top and white leggings. The woman on the right is older, with short grey hair, wearing a white short-sleeved top and light-colored trousers. She is holding a bouquet of daisies. Both are smiling and looking at each other. The background shows a green field under a clear sky.

medi

NOWOŚĆ -
bezszwowa
rękawiczka
i część na dłoń

Idealna równowaga pomiędzy siłą i trwałością a delikatnością i miękkością

mediven harmony – nowy wymiar jakości
kompresjoterapii kończyny górnej

medi. I feel better.





medi stanowi przyszłość terapii kompresyjnej

**Silna marka. Pełny asortyment produktów.
Przekonujące rozwiązania.**

medi World of Compression: drogowskaz do przyszłości z ponad 65 lat doświadczenia w dziedzinie leczenia kompresją. Produkty spełniają najwyższe wymagania w zakresie jakości, innowacyjności i wzornictwa. Przyczynić się do kształtowania wspólnej przyszłości, zapewniaj pozytywne doznania – z myślą o Tobie i Twoich pacjentach.

Zadowoleni klienci i nowy potencjał

**„Wybór wielu kombinacji dla większego
skutecznego leczenia“**

„Odzież uciskowa medi dostępna jest w wielu wariantach. medi oferuje odpowiednie zaopatrzenie dla pacjentów ze wskazaniami flebologicznymi. Szeroki asortyment dodatków pomaga na indywidualne dopasowanie produktów tak, aby pacjenci mogli cieszyć z ich długotrwałego noszenia. W firmie medi zapewniamy partnerską współpracę i gwarantujemy najlepszy serwis usług.“



*„Wysoka jakość
i skuteczność tego
rękawa to dokładnie to
czego potrzebowałam“*

Susan B., 39 lat

*„Mediven harmony
to idealny materiał.
Łatwy w zakładaniu
i pielęgnacji oraz
przyjemny w dotyku.“*

Ella S., 42 lat



Wygodne i skuteczne

mediven harmony wysuwa się na prowadzenie.

Innowacyjny nowy rękaw mediven harmony zapewnia najlepszą z możliwych opiekę. Pacjenci docenią idealną równowagę między skuteczną ochroną i udoskonaloną wygodą noszenia.

Dobór prawidłowego ucisku to połączenie specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. mediven harmony to wyjątkowa tkanina, która jest miękka w dotyku, skuteczna klinicznie i łatwa w zakładaniu. Cechuje się również nowym wzorem, który obejmuje podwójną elipsę – jedną w zgięciu i jedną na czubku łokcia – zapewniając pacjentom maksymalną wygodę noszenia. Zastosowanie elips ma na celu poprawę skuteczności działania produktu, nieograniczony zakres ruchów jak również ma zachęcić pacjentów do noszenia rękawów. Produkty z serii mediven harmony są uszyte zgodnie z rygorystycznymi standardami jakości RAL, których zadaniem jest zapewnienie gwarancji prawidłowego stopniowanego ucisku w produkcie.

Uzyskanie certyfikacji RAL wymaga przeprowadzania regularnych testów przez Instytut Hohenstein i stanowi złoty standard w zakresie odzieży uciskowej. Jakość gwarantowana.

* Test of Various Arm Sleeves Canada, iCONSULT Research & Consulting GmbH, Munich, 2016. 

mediven harmony® rękawy

Wyjątkowe cechy i właściwości

Cecha 1

Podwójne elipsy

Dwie strefy eliptyczne łokcia to nieporównywalny komfort

Innowacyjny materiał z podwójnymi elipsami pozwala na zachowanie swobody ruchu w zgięciu łokcia oraz eliminuje rolowanie i ucisk materiału we wrażliwym miejscu podczas zginania i prostowania łokcia.

Elipsy w łokciu przyczyniają się do optymalnego drenażu limfatycznego poprzez stopniowany ucisk. Marszczenie tkaniny ograniczone jest praktycznie do zera aby móc cieszyć się codziennością bez dolegliwości.



mediven harmony: elipsa w zgięciu łokcia



mediven harmony: elipsa do czubku łokcia

Cecha 2

Komfortowy ściągacz silikonowy

Wąski ściągacz z nakrapianymi guzkami silikonu skutecznie podtrzymuje rękaw przez cały dzień na właściwym miejscu. Solidnie a za razem niewyczuwalnie wszyty za pomocą płaskiego, niewyczuwalnego szwu. Opracowany kształt i właściwości silikonu pozwalają skórze oddychać i podobnie jak cały rękaw przepuszczać powietrze.

Dla osób nie mogących stosować silikonu dostępne są również rękawy niesamonośne z nakładką na ramię.




mediven harmony ściągacz silikonowy

Cecha 3

Wysoka ochrona

Innowacyjny materiał to gwarancja skuteczności. Szczególnie rekomendowany Pacjentom po zabiegach, pooperacyjnych i pourazowych, jak również nadaje się stosowania u osób z miękką tkanką i obrzękiem w pierwszej fazie. Mediven harmony łączy w sobie wysoką skuteczność ucisku z delikatnym i miłym w dotyku, elastycznym materiałem.

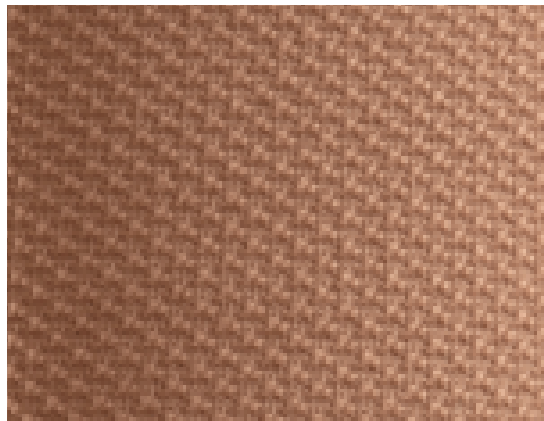


mediven harmony innowacyjny materiał

Cecha 4

Skuteczny i miękki

Zaskakująco miękki materiał jest wynikiem nowych technologii tkania i stałego rozwój dla komfortu pacjentów. Oprócz podwójnej elipsy w łokciu, innowacyjna struktura tkaniny stymuluje tkankę i wywiera przyjemny efekt masażu.

Dodatek lanoliny w materiale został zastosowany w celu zapewnienia zalet naturalnego nawilżenia dla komfortu nawet wrażliwej skóry.

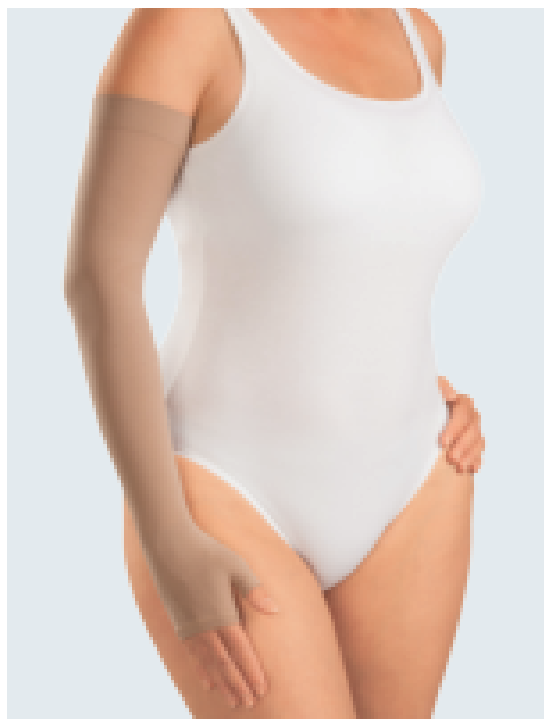

Piaskowy rękaw mediven harmony z częścią na dłoń AG

mediven harmony[®] rękawy

Komfortowe i skuteczne okrągłodziałane rękawy uciskowe

Wskazania*

- Zakrzepica żył ramienia
- Obrzęk pooperacyjny i pourazowy
- Pierwotny i wtórny obrzęk limfatyczny stadium 1 (warunkowo)
Uwaga: produkt nie jest rekomendowany w przypadku wyraźnego obrzęku powyżej początkowego stadium 1

Część na dłoń lub rękawiczka z palcami

- Zapobieganie gromadzeniu się płynu limfatycznego w obszarze dłoni podczas noszenia medycznego rękawa kompresyjnego
- Obrzęk pooperacyjny i pourazowy

Cechy i właściwości

- Najwyższej jakości standard RAL
- Innowacyjna tkanina z niezawodnym wykończeniem
- Podwójne elipsy w zgięciu łokcia po stronie wewnętrznej i zewnętrznej dla lepszego komfortu i swobody zakresu ruchu ramienia
- Samonośny ściągacz silikonowy zapewnia pewne i stabilne mocowanie
- Można prać w pralce w delikatnym cyklu w temperaturze do 40 °C i suszyć w suszarce bębnowej
- Bez lateksu
- Naturalnie nawilżające właściwości lanoliny
- Zadbana skóra przez cały rok dzięki Clima Comfort
- Idealne dopasowanie dzięki szerokiej gamie rozmiarów

Warianty

- Dostępne w wersjach:
 - rękaw od nadgarstka do pachy samonośny z silikonem,
 - rękaw od nadgarstka do pachy niesamonośny,
 - rękaw od nadgarstka do pachy z nakładką na ramię,
 - rękaw z częścią na dłoń do pachy samonośny z silikonem,
 - rękaw z częścią na dłoń niesamonośny,
 - rękaw z częścią na dłoń z nakładką na ramię,
 - część na dłoń z kciukiem,
 - rękawiczka z palcami
- Rozmiary I - VIII ** regularne i ekstra szerokie
- Różnorodność: dostępna w 2 klasach kompresji, 2 kolorach i 2 opcjach dłoni

Każda opcja teraz dostępna również w wersji bezszwowej

Skład materiału		
	Elastane (EL)	Polyamide (PA)
CCL 1	34 %	66 %
CCL 2	43 %	57 %

Klasy ucisku

CCL 1 15 – 21 mmHg

CCL 2 23 – 32 mmHg

Korzyści



Perfect Fit



Clima Comfort



Variety



Double ellipses




Kolory

S
Piaskowy

S
Karmel

Dwie długości w wersjach samonośnych

Rękawy samonośne ze ściągaczem silikonowym dostępne są w wersji krótszej CG 36-40cm oraz dłuższej (standardowej) CG41-47cm zarówno od nadgarstka do pachy jak i w opcji z połączoną częścią na dłoń

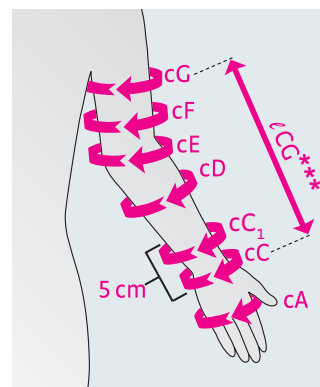

Punkty pomiarowe mediven harmony

* Wskazania te należy traktować jako zalecenie. Dobór modelu, struktury materiału czy siły kompresji zależy od diagnozy i oczekiwanych efektów terapii. Zalecenia każdorazowo definiowane są przez personel medyczny a zatwierdzone przez lekarza prowadzącego Pacjenta, biorącego pod uwagę możliwe choroby współistniejące mogące być przeciwwskazaniem do kompresjoterapii.

** CG: Długość CG mierzona jest po wewnętrznej stronie od nadgarstka (najwyższe miejsce) do przedniej fałdy pachowej w linii prostopadłej do osi ciała.

mediven harmony®

Tabela rozmiarów i pomiarów

Opcje (wszystkie wersje w szerokościach standardowych oraz poszerzonych od punktu D do G)

AG rękaw niesamonośny połączony z częścią na dłoń			AG rękaw samonośny ze ściągaczem silikonowym z częścią na dłoń			AG rękaw z nakładką na ramię i częścią na dłoń				
										
Art.No.:			Art.No.:			Art.No.:				
Długość standardowa	Obwód regularny	CCL 1: 2Y10x01-8 CCL 2: 2Z10x01-8	Obwód regularny	CCL 1: 2Y11x01-8 CCL 2: 2Z11x01-8	Obwód regularny	Obwód regularny	CCL 1: 2Y15x01-8 CCL 2: 2Z15x01-8			
	Poszerzony	CCL 1: 2Y10x11-8 CCL 2: 2Z10x11-8		CCL 1: 2Y11x11-8 CCL 2: 2Z11x11-8			Poszerzony		CCL 1: 2Y15x11-8 CCL 2: 2Z15x11-8	
Długość krótka*			Obwód regularny							
			CCL 1: 2Y41701-8 CCL 2: 2Z41701-8							
			Poszerzony							
			CCL 1: 2Y41711-8 CCL 2: 2Z41711-8							
CG			CG rękaw od nadgarstka do pachy samonośny ze ściągaczem silikonowym			CG rękaw od nadgarstka do pachy z nakładką na ramię				
										
Art.No.:			Art.No.:			Art.No.:				
Długość standardowa	Obwód regularny	CCL 1: 2Y00x01-8 CCL 2: 2Z00x01-8	Obwód regularny	CCL 1: 2Y01x01-8 CCL 2: 2Z01x01-8	Obwód regularny	Obwód regularny	CCL 1: 2Y05x01-8 CCL 2: 2Z05x01-8			
	Poszerzony	CCL 1: 2Y00x11-8 CCL 2: 2Z00x11-8		CCL 1: 2Y01x11-8 CCL 2: 2Z01x11-8			Poszerzony		CCL 1: 2Y05x11-8 CCL 2: 2Z05x11-8	
Długość krótka*			Obwód regularny							
			CCL 1: 2Y31701-8 CCL 2: 2Z31701-8							
			Poszerzony							
			CCL 1: 2Y31711-8 CCL 2: 2Z31711-8							

x = kolor; 7 - karmel, 8 - piaskowy

Rękawy	Rozmiar I		Rozmiar II		Rozmiar III		Rozmiar IV	
Obwody (cm)	Regularny	Poszerzony	Regularny	Poszerzony	Regularny	Poszerzony	Regularny	Poszerzony
cG	25.5-28.0	28.5-31.0	28.0-30.5	30.5-33.5	30.0-33.0	33.0-36.0	32.0-35.0	35.0-38.5
cF	23.5-25.5	25.5-28.0	25.0-27.5	27.5-30.0	27.5-30.0	30.0-33.0	29.5-32.0	32.0-35.0
cE	23.0-25.0	24.0-26.0	24.5-26.5	26.5-29.0	26.0-28.5	28.5-31.0	27.5-30.0	30.0-33.0
cD	22.0-24.0	24.0-26.0	23.0-25.0	25.0-27.5	24.0-26.0	26.0-28.5	25.0-27.5	28.0-30.5
cC ₁ = 100%**	15.0-16.5		16.5-18.0		18.0-19.5		19.5-21.0	
cC	13.5-14.5		14.5-15.5		16.0-17.5		17.5-19.0	
cA	15.0-18.0		16.0-19.0		17.0-20.0		19.0-22.0	

Rękawy	Rozmiar V		Rozmiar VI		Rozmiar VII	
Obwody (cm)	Regularny	Poszerzony	Regularny	Poszerzony	Regularny	Poszerzony
cG	33.5-36.5	37.0-40.5	36.0-39.5	39.5-43.0	38.0-41.5	41.5-45.5
cF	31.0-34.0	34.0-37.0	33.0-36.0	36.0-39.5	35.0-38.5	38.5-42.0
cE	29.0-31.5	31.5-34.5	30.5-33.5	33.5-36.5	32.5-35.5	35.5-39.0
cD	27.0-29.5	29.5-32.0	28.5-31.0	31.0-34.0	30.5-33.5	33.5-36.5
cC ₁ = 100%**	21.0-23.0		23.0-25.0		25.0-27.5	
cC	19.0-20.5		20.5-22.5		22.5-24.5	
cA	20.0-23.0		22.0-25.0		24.0-27.0	

Długości (cm)	Standardowo	Wersja krótka
	41-47	36-40

* Długość krótka wyłącznie na specjalne zamówienie, czas oczekiwania do 4 tygodni
 ** Pomiar cC1 5cm powyżej punktu cC

mediven harmony® rękawiczka

Wyjątkowe cechy

NOWOŚĆ teraz także
w wersji bezszwowej

Okrągłodziąca seria mediven harmony od medi dopasowana jest do potrzeb i oczekiwań pacjentów oferując zarówno rękawy jak i warianty na dłoń z palcami lub bez. Zarówno rękawiczki z palcami jak i części na dłoń z podstawą kciuka stanowią uzupełnienie skutecznej i komfortowej terapii uciskowej kończyny górnej w pierwszej fazie obrzęku.

Cecha 1

Oddychający materiał bez lateksu

Dzięki miękkiemu i oddychającemu materiałowi rękawiczka i część na dłoń jest delikatna i miękka, nie powoduje podrażnień nawet wrażliwej skóry.

Podobnie jak w przypadku rękawów, dodatek lanoliny zapewnia naturalne nawilżenie, miękkość i gładkość będąc niezwykle przyjemnym w stosowaniu.



Cecha 2

Miękka krawędź wykończenia (tylko w wersji bez szwu)

NOWOŚĆ

Cienka i miękka, ledwo wyczuwalna krawędź zapewnia dyskretne przejście pomiędzy rękawem a częścią na dłoń czy rękawiczką.

Jednocześnie zapewnia łagodne przejście z zachowaniem gradientu kompresji nie powodując kumulowania się ucisku w nadgarstku.



Wersja bezszwowa - nowe możliwości i dodatkowe korzyści


NOWOŚĆ: dostępna
już od lipca 2019

Cecha 3

Bezszwowe wykończenie palców

NOWOŚĆ

Bezszwowa wersja pomaga pokonać ograniczenia na przykład podczas drobnych czynności motorycznych w codziennym życiu. Miętko wykończone końce palców zapewniają dobre dopasowanie i uchwyt bez dyskomfortu.

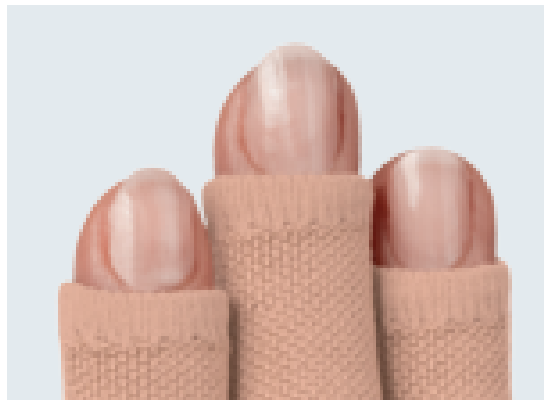


Cecha 4

Miękkie, bezszwowe strefy pomiędzy palcami

NOWOŚĆ

Bezszwowa technologia tkania daje poczucie wygody, swobody ruchów i elastyczności w delikatnych punktach jakimi są podstawy palców i strefy pomiędzy nimi.

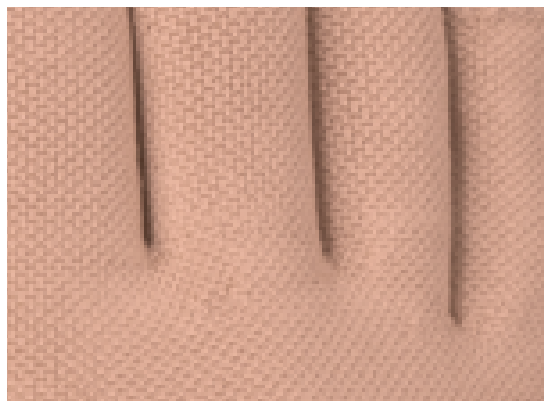

Cecha 5

Bezszwowa podstawa kciuka

NOWOŚĆ

Bezszwowa wersja gwarantuje swobodny, niczym nie skrępowany ruch kciuka i pewny chwyt, dzięki ergonomicznemu kształcie redukującym ucisk i ograniczenia w obrębie palca odpowiadającego za chwyt.



mediven harmony[®] rękawiczka

Wskazania*

- profilaktyka obrzęku związanego z zastojem płynu limfatycznego, u Pacjentów z tendencją do obrzęku, szczególnie stosujących rękawy uciskowe od nadgarstka mogących przesunąć obrzęk w kierunku dłoni
- przy obrzękach pooperacyjnych i pourazowych

Dostępne warianty:

- AC1 rękawiczka z uciskowymi palcami
- AC1 część na dłoń bez palców, jedynie z podstawą kciuka
- Bezszywowa AC1 rękawiczka z uciskowymi palcami
- Bezszywowa AC1 część na dłoń bez palców, jedynie z podstawą kciuka

Dostępne rozmiary

- Standardowo II – VII

Skład materiału

	Elastane (EL)	Polyamide (PA)
CCL 1	18 %	82 %
CCL 2	22 %	78 %

Klasy ucisku

CCL 1 15 – 21 mmHg

CCL 2 23 – 32 mmHg


Kolory

S
Piaskowy

S
Karmel




Bezszywowa rękawiczka AC₁

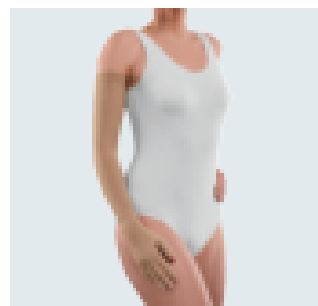

Bezszwowy rękaw do nadgarstka CG z założoną rękawiczką AC₁



Bezszywowa część na dłoń AC₁

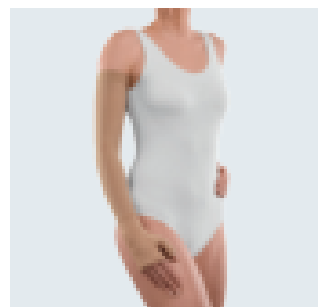

Bezszwowy rękaw do nadgarstka CG z założoną rękawiczką AC₁

* Wskazania te należy traktować jako zalecenie. Dobór modelu, struktury materiału czy siły kompresji zależy od diagnozy i oczekiwanych efektów terapii. Zalecenia każdorazowo definiowane są przez personel medyczny a zatwierdzone przez lekarza prowadzącego Pacjenta, biorącego pod uwagę możliwe choroby współistniejące mogące być przeciwwskazaniem do kompresjoterapii.

mediven harmony[®]

Tabela rozmiarów i pomiarów

Opcje

Bezszwowa AC₁ część na dłoń bez palców, jedynie z podstawą kciuka



CCL 1 Art.No.: 2Y90x02-07
CCL 2 Art.No.: 2Z90x02-7

Bezszwowa AC₁ rękawiczka z uciskowymi palcami



CCL 1 Art.No.: 2Y91x02-7
CCL 2 Art.No.: 2Z91x02-7

NOWOŚĆ: teraz dostępna również wersja bezszwowa!

AC₁ część na dłoń (ze szwem) bez palców, jedynie z podstawą kciuka



CCL 1 Art.No.: 2Y20x02-7
CCL 2 Art.No.: 2Z20x02-7

AC₁ rękawiczka (ze szwem) i uciskowymi palcami



CCL 1 Art.No.: 2Y21x02-7
CCL 2 Art.No.: 2Z21x02-7

x = kolor; 7 - karmel, 8 - piaskowy

Obwody i rozmiary części na dłoń (cm)

Rozmiary	II	III	IV	V	VI	VII
cC ₁	15.0 – 18.0	17.0 – 20.0	19.0 – 21.5	21.0 – 23.5	23.0 – 26.0	25.5 – 30.0
cC	13.5 – 15.5	15.0 – 18.0	17.0 – 20.0	19.0 – 21.0	20.0 – 23.5	22.5 – 27.5
cB	15.5 – 20.0	17.5 – 21.0	19.5 – 23.0	20.5 – 24.0	22.5 – 26.0	24.5 – 30.0
cA	15.0 – 19.0	17.0 – 20.0	19.0 – 22.0	20.0 – 23.0	22.0 – 25.0	24.0 – 29.0

Obwody i rozmiary palców (cm)



Rozmiary		II	III	IV	V	VI	VII
Kciuk	Podstawa cX	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	10.0
	Czubek cZ	6.0	6.5	6.5	7.0	7.5	8.0
Palec wskazujący	Podstawa cX	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.5
	Czubek cZ	5.0	5.5	6.0	6.0	6.5	7.0
Palec środkowy	Podstawa cX	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.5
	Czubek cZ	5.0	5.5	6.0	6.0	6.5	7.0
Palec serdeczny	Podstawa cX	6.0	6.5	7.0	7.0	7.5	9.0
	Czubek cZ	5.0	5.0	5.5	5.5	6.0	6.5
Mały palec	Podstawa cX	5.5	6.0	6.0	6.5	7.0	8.0
	Czubek cZ	4.5	4.5	5.0	5.0	5.5	6.0

Długości części na dłoń (cm)

AB	3.5 – 4.5
AC	10.0 – 12.0
AC ₁	15.0 – 16.0

Długości palców (cm)

Kciuk	3.5 – 4.5
Palec wskazujący	4.5 – 5.5
Palec środkowy	5.5 – 6.5
Palec serdeczny	4.5 – 5.5
Mały palec	3.5 – 4.5

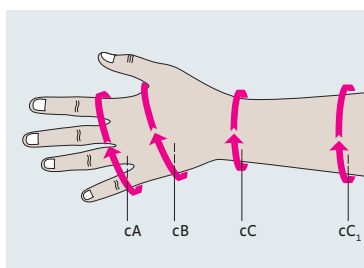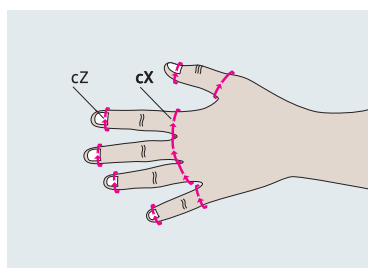

Obwód cZ jest mierzony na początkach paznokci.
Obwód cX jest mierzony u podstawy każdego z palców.

* Obwód cC1 jest mierzony 5cm powyżej cC (najwęższego miejsca)



NOWA –
bezzwowa
rękawiczka
mediven
harmony



*„Idealny balans
pomiędzy miękką
i komfortową tkaniną a
najlepszą jakością
i skutecznością“*

Emma K., 70 lat

* Test of Various Arm Sleeves Canada, iCONSULT Research & Consulting GmbH, Munich, 2016.

Rady i wskazówki łatwego zakładania rękawów mediven harmony

codzienne stosowanie rękawa uciskowego może być łatwe i przyjemne w aplikowaniu


Stelaż medi Butler do rękawów

Wysokość 11cm

Samodzielne zakładanie rękawa uciskowego może być jeszcze łatwiejsze dzięki pomocom jak stelaże medi Butler. Dzięki tej metodzie możesz zapomnieć o codziennych zmaganiach z rękem czy pomocy drugiej osoby.



Zeskanuj kod QR telefonem i sprawdź online jak proste i wygodne jest stosowanie profesjonalnych produktów medi

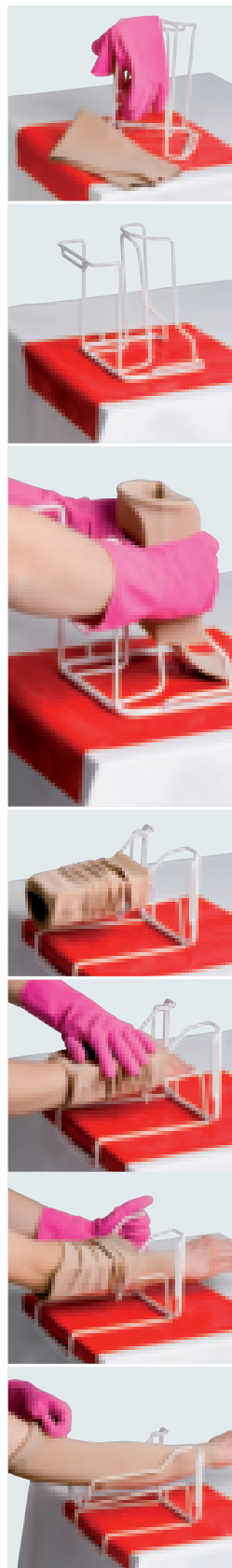

1. W medi rekomendujemy ubieranie produktów kompresyjnych w rękawiczkach gumowych lub teksylnych aby uniknąć możliwych uszkodzeń mechanicznych materiału oraz aby zapewnić lepsze uchwycenie tkaniny i jej prawidłowe rozprowadzenie na całej długości

2. Postaw medi Butler do ubierania rękawów na stole lub innej równej powierzchni, ten model ma również możliwość zaczepienia na krawędzi oparcia krzesła żeby jeszcze łatwiej stosować stelaż w warunkach najbardziej wygodnych dla Pacjenta

3. Naciągnij na metalową ramkę z otworem rękaw od nadgarstka aż do górnego wykończenia. Do przesuwania produktu używaj obudwóch rąk dla zachowania lepszej precyzji.

Dla zakładania rękawa na:
lewą rękę – od lewej strony, ustaw urządzenie mniej więcej na godzinę 8
prawą rękę – od prawej strony, ustaw urządzenie mniej więcej na godzinę 4

4. Stabilnie zaczeep urządzenie o brzeg stołu lub krawędź krzesła, kierując otwór z naciągniętym produktem w swoją stronę.

5. – 6. Następnie ruchem powolnym ale pewnym i nieprzerwanym wsuń najpierw dłoń przez nadgarstek aż za łokieć.

7. Na samym końcu wysuń stelaż i podciągnij krawędź rękawa umieszczając go w prawidłowym miejscu, poprawiając całość ułożenia z pomocą rękawicy. W ten oto sposób w kilka chwil profesjonalnie możesz zakładać swój wyrób każdego dnia bez zbędnego wysiłku.

mediven® harmony – mocne strony produktu



Podwójna elipsa, innowacyjna tkanina

- Podwójna elipsa po obu stronach łożka umożliwia swobodne ruchy, jak i komfort podczas codziennego stosowania. Innowacyjna tkanina zastosowana w elipsach redukuje uczucie ucisku podczas zginania i prostowania łożka.
- Dzięki elipsie umieszczonej w zgięciu łożka rękaw korzystnie wpływa na przepływ limfy. Dodatkowo, minimalna liczba marszczeń zapewnia optymalną wygodę.

Innowacyjna tkanina

- Innowacyjna tkanina gwarantuje skuteczność. Jest specjalnie dostosowana do leczenia pooperacyjnego lub pourazowego, również w przypadku miększej tkanki łącznej. mediven harmony łączy w sobie wyjątkową stabilność i delikatny dotyk elastycznej dzianiny.
- Złożono wniosek patentowy



Idealne dopasowanie

- Każdy produkt jest dostępny w 16 rozmiarach, zapewniając perfekcyjne dopasowanie
- Indywidualne dopasowanie, dzięki precyzyjnym pomiarom



Clima Comfort* zapewnia idealną regulację temperatury

- Dobre samopoczucie przez cały rok
- Wysoce aktywna przepuszczalność powietrza
- Zapobiega uczuciu swędzenia



Rodzaje produktów

- 2 klasy ucisku
- 2 kolory: piaskowy, karmelowy
- 2 wersje na dłoń: rękawiczka z palcami lub część na dłoń bez palców

Etykieta jakości

- Nasza medyczna odzież uciskowa jest regularnie poddawana kontroli przeprowadzanej przez Instytut Badawczy Hohenstein w oparciu o wytyczne dotyczące testowania i jakości RAL-GZ 387. Jako potwierdzenie, że mediven harmony spełnia warunki dotyczące jakości, na opakowaniu i etykiecie produktu znajduje się etykieta jakości.



Bezproblemowe dbanie o produkt

- Produkty można prać w pralce z użyciem programu dla tkanin delikatnych w temperaturze 40°C i suszyć na zimno w suszarce bębnowej.

Bardzo dobra tolerancja skóry; świetnie nadaje się do codziennego noszenia

- Nie zawiera lateksu i bawełny.
- Z dodatkiem lanoliny przyczyniającej się naturalnego nawilżania skóry.



*Clima Comfort

Komfort, przebadany naukowo przez francuski instytut IFTH. Wyniki testów wykazały, że technologia Clima Comfort opracowana przez medi gwarantuje regulację temperatury między skórą a pończochą. Produkty medi uzyskały imponujący wynik 11 punktów z 12.



medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
D-95448 Bayreuth / Germany
T +49 921 912-0
F +49 921 912-781
export@medi.de
www.medi.de/en

medi Australia Pty Ltd
83 Fennell Street
North Parramatta NSW 2151
Australia
T +61 2 9890 8696
F +61 2 9890 8439
sales@mediaustralia.com.au
www.mediaustralia.com.au

medi Austria GmbH
Adamgasse 16/7
6020 Innsbruck
Austria
T +43-512 57 95 15
F +43-512 57 95 15 45
vertrieb@medi-austria.at
www.medi-austria.at

medi Belgium bvba
Posthoornstraat 13/1
3582 Koersel
Belgium
T: +32-11 24 25 60
F: +32-11 24 25 64
info@medibelgium.be
www.medibelgium.be

medi Brasil
Rua Cristovan de Vita, n.º 260, Un. 30,
Centro Logístico Raposo Tavares,
Vila Camargo
Vargem Grande Paulista - SP
CEP 06730-000
Brasil
T: +55-11-3500 8005
sac@medibrasil.com
www.medibrasil.com

medi Canada Inc / médi Canada Inc
597, Rue Duvernay, Verchères
QC Canada J0L 2R0
T: +1 450-583-3317 / +1 800 361 3153
F: +1 888-583-6827
service@medicanada.ca
www.medicanada.ca

MAXIS a.s.,
medi group company
Slezská 2127/13
120 00 Prague 2
Czech Republic
T: +420 571 633 510
F: +420 571 616 271
info@maxis-medica.com
www.maxis-medica.com

medi Danmark ApS
Vejlegardsvej 59
2665 Vallensbaek Strand
Denmark
T +45 70 25 56 10
F +45 70 25 56 20
kundeservice@sw.dk
www.medit danmark.dk

medi Bayreuth España SL
C/Canigó 2 – 6 bajos
Hospitalet de Llobregat
08901 Barcelona
Spain
T +34 93 260 04 00
F +34 93 260 23 14
medi@mediespana.com
www.mediespana.com

medi France
Z.I. Charles de Gaulle
25, rue Henri Farman
93297 Tremblay en France Cedex
France
T +33 1 48 61 76 10
F +33 1 49 63 33 05
infos@medi-france.com
www.medi-france.com

medi Hungary Kft.
Bokor u. 21.
1037 Budapest
Hungary
T +36 1371 0090
F +36 1371 0091
info@medi.hu
www.medi.hu

medi Italia s.r.l.
Via Giuseppe Ghedini, 2
40069 Zola Predosa (BO)
Italy
T: +39-051 6 13 24 84
F: +39-051 6 13 29 56
info@medi-italia.it
www.medi-italia.it

Tachezy Sanit Srl.
Via Druso 48/a
39100 Bolzano
Italy
T: +39 0471 288 068
F: +39 0471 282 773
info@tachezysanit.com
www.tachezysanit.com

medi Nederland BV
Heusing 5
4817 ZB Breda
The Netherlands
T +31 76 57 22 555
F +31 76 57 22 565
info@medi.nl
www.medi.nl

medi Norway AS
Vestheimvegen 35
4250 Kopervik
Norway
T: +47 52 84 45 00
F: +47 52 84 45 09
post@medinorway.no
www.medinorway.no

medi Polska Sp. z o.o.
ul. Łabędzka 22
44-121 Gliwice
Poland
T: +48-32 230 60 21
F: +48-32 202 87 56
info@medi-polska.pl
www.medi-polska.pl

medi Bayreuth Unipessoal Lda.
Rua do Centro Cultural, no. 43
1700-106 Lisbon
Portugal
T +351 21 843 71 60
F +351 21 847 08 33
medi.portugal@medibayreuth.pt
www.medi.pt

medi RUS LLC
Business Center NEO GEO
Butlerova Street 17
117342 Moscow
Russia
T +7-495 374 04 56
F +7-495 374 04 56
info@medirus.ru
www.medirus.ru

medi Trading (Shanghai) Co. Ltd.
Room 105, Building No. 4,
Lane 500 ShengXia Road
Pudong New District
201210 Shanghai
People's Republic of China
T: +86-21 61761988
F: +86-21 61769607
info@medi.cn

medi Sweden AB
Box 6034
192 06 Sollentuna
Sweden
T +46 8 96 97 98
F +46 8 626 68 70
info@medi.se
www.medi.se

Medi Turk Ortopedi Medikal İç ve Dis Tic. AS
Kültür mah. Çaldıran sok.14/3
06420 Çankaya/Ankara
Turkey
T +90 312 435 20 26
F +90 312 434 22 82
info@medi-turk.com
www.medi-turk.com

medi UK Ltd.
Plough Lane
Hereford HR4 0EL
Great Britain
T +44 1432 37 35 00
F +44 1432 37 35 10
enquiries@mediuk.co.uk
www.mediuk.co.uk

medi Ukraine LLC
Evhena Sverstiuka str, 11.
Kiev 02002
Ukraine
T: +380 44 591 11 63
F: +380 44 392 73 73
info@medi.ua
http://medi.ua

medi USA L.P.
6481 Franz Warner Parkway
Whitsett, N.C. 27377-3000
USA
T +1-336 4 49 44 40
F +1-888 5 70 45 54
info@mediusa.com
www.mediusa.com

Siedziba Producenta:
medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
Germany
T + 49 921 912-0
F + 49 921 912-781
export@medi.de
www.medi.de/en

Siedziba Oddziału w Polsce:
medi Polska Sp. z o.o.
ul. Łabędzka 22
44-121 Gliwice
T: +48 32 230 60 21
F: +48 32 202 87 56
info@medi-polska.pl
www.medi-polska.pl



0097C90 / 08.2019