

medi

KOMPRESJA

w przewlekłej niewydolności
żylniej oraz chorobie
tętnic obwodowych
(PAD) /
cukrzycy ?

Mikroplusz z wątny merynosa wokół całej stopy

Mocna, prążkowana struktura

Unikatowa, miękka podszewka sięgająca od czubków palców aż na

Tak,
oczywiście!

mediven® angio

Bezpieczeństwo po czubki palców Wyjątkowo długi, płaski szew kostkę

mediven® angio

Bezpieczna terapia – aż po czubki
palców.





Czy wiesz?

mediven® angio
są **unikatowe**

i gwarantują

bezpieczeństwo,

CO potwierdza
badanie **kliniczne.**

Unikatowa innowacja

mediven® angio – pierwsze i jedyne medyczne podkolanówki uciskowe, których bezpieczeństwo potwierdzono w badaniach na pacjentach z przewlekłą niewydolnością żylną oraz współistniejącą chorobą tętnic obwodowych (PAD) i / lub cukrzycą.*

Unikatowe cechy produktu

mediven angio to produkt opracowany z myślą o pacjentach cierpiących na przewlekłą niewydolność żylną, chorobę tętnic obwodowych (ang. PAD – peripheral artery disease) o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego i / lub cukrzycę, optymalnie dostosowany do ich potrzeb.

Unikatowe bezpieczeństwo

W badaniu klinicznym¹, uwzględniającym pacjentów obu grup, oceniono i naukowo potwierdzono bezpieczeństwo mediven® angio:

- ✓ Stabilne krążenie krwi, aż po najmniejsze naczynia
- ✓ Bez uszkodzeń skóry
- ✓ Bez marszczenia i zwijania
- ✓ Bez punktowego ucisku
- ✓ Wysoki komfort noszenia



Potwierdzono dla kompresji klasy 1 i 2

* Bezpieczeństwo wyrobu potwierdzone badaniem klinicznym: Stosowanie medycznych podkolanówek kompresyjnych mediven angio u pacjentów cierpiących na przewlekłą niewydolność żylną oraz współistniejącą chorobę tętnic obwodowych o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego (ang. PAD – peripheral artery disease) oraz/lub cukrzycę jest bezpieczne.¹

¹ Rother U et al. Safety of medical compression stockings in patients with diabetes mellitus or peripheral arterial disease. BMJ Open Diab Res Care 2020;8:e001316.

Unikatowa podszewka

Podszewka z mikropluszu wokół całej stopy

Mikroplusz – od czubków palców aż po mankiet.

- ✓ Dodatkowy komfort noszenia
- ✓ Łatwe zakładanie i zdejmowanie

Dodatkowa podszewka z wełny merynosa wokół całej stopy

Tylko podkolanówki mediven angio wyposażone są w unikatową, miękką podszewkę, sięgającą od czubków palców aż nad kostkę.

- ✓ Chronią wysunięte struktury kostne
 - kostkę wewnętrzną i zewnętrzną
 - śródstopie
 - stawy śródstopno-paliczkowe
 - czubki palców
- ✓ Zapobiegają skokom ciśnienia oraz zmianom skórnym
- ✓ Chronią skórę wrażliwą i suchą

Pluszowa podszewka z naturalnej wełny merynosa

- ✓ Optymalna termoregulacja
- ✓ Dodatkowy komfort noszenia

Wyjątkowo długi, płaski szew na palcach

Anatomiczne dopasowanie


Wyjątkowo długi i płaski szew wygodnie i anatomicznie układa się na palcach. Szew okala stawy śródstopno-paliczkowe, chroniąc wypukłości kostne.

- ✓ Odciąża palce i stawy śródstopno-paliczkowe
- ✓ Utrzymuje stabilne mikrokrążenie w skórze
- ✓ Zapobiega powstawaniu zmian skórnych na palcach
- ✓ Zapobiega uszkodzeniom w obrębie palców

Dwie długości stopy

Dla dodatkowego odciążenia palców i wrażliwych obszarów stopy, podkolanówki mediven angio dostępne są w dwóch długościach stopy, w standardowych rozmiarach.

- ✓ Optymalne dopasowanie do stopy
- ✓ Zapobieganie skokom ciśnienia i nadmiernemu napięciu w palcach; materiał nie marszczy się i nie zwija

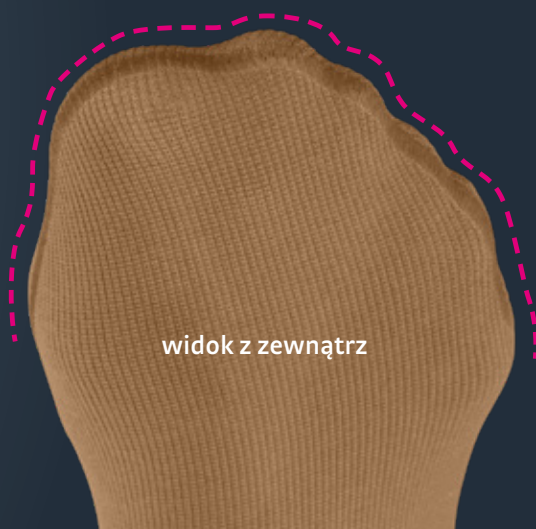

Mocna, prążkowana struktura

Optymalny efekt kompresji

Idealny stosunek ucisku spoczynkowego do roboczego

- ✓ Skuteczna kompresja układu żylnego
- ✓ Kompresja łagodna dla układu żylnego, uwzględniająca ograniczone czucie w dolnych partiach nóg

Struktura easy-grip

Struktura easy-grip pozwala łatwo rozprowadzić dzianinę i równo ułożyć pończochę na nodze. Pomagają w tym też wysoka rozciągliwość i podszewka z mikropluszu.

- ✓ Ułatwione zakładanie
- ✓ Dodatkowy komfort noszenia

Design unisex

Elegancki, dyskretny styl dla niej i dla niego

Dostępne w kolorze czarnym i karmelowym

Model karmelowy pozwala szybko dostrzec wydzielanie płynu z ewentualnych powierzchniowych ran, ponieważ materiał zabarwia się na ciemniejszy kolor.



Pięta 90°

Optymalne rozprowadzenie dzianiny

Pięta o konstrukcji 90° pozwala na równe rozprowadzenie dzianiny w obszarze pięty i podbicia.

- ✓ Nie marszczy się i nie zwija
- ✓ Zmniejsza ryzyko uszkodzeń skóry w obszarze podbicia



Wyjątkowo szeroki mankiet

Szeroki krój


Wywiera nacisk na dużą powierzchnię

- ✓ Zapobiega podwyższonemu ciśnieniu na wysokości mankietu
- ✓ Utrzymuje właściwą perfuzję w skórze
- ✓ Nie ogranicza drenażu z obszaru pod kolaniem
- ✓ Zapobiega uszkodzeniom skóry

Bezpieczne i pewne przyleganie

Pończocha pozostaje na swoim miejscu i nie zsuwa się

- ✓ Pończocha nie marszczy się i nie zwija

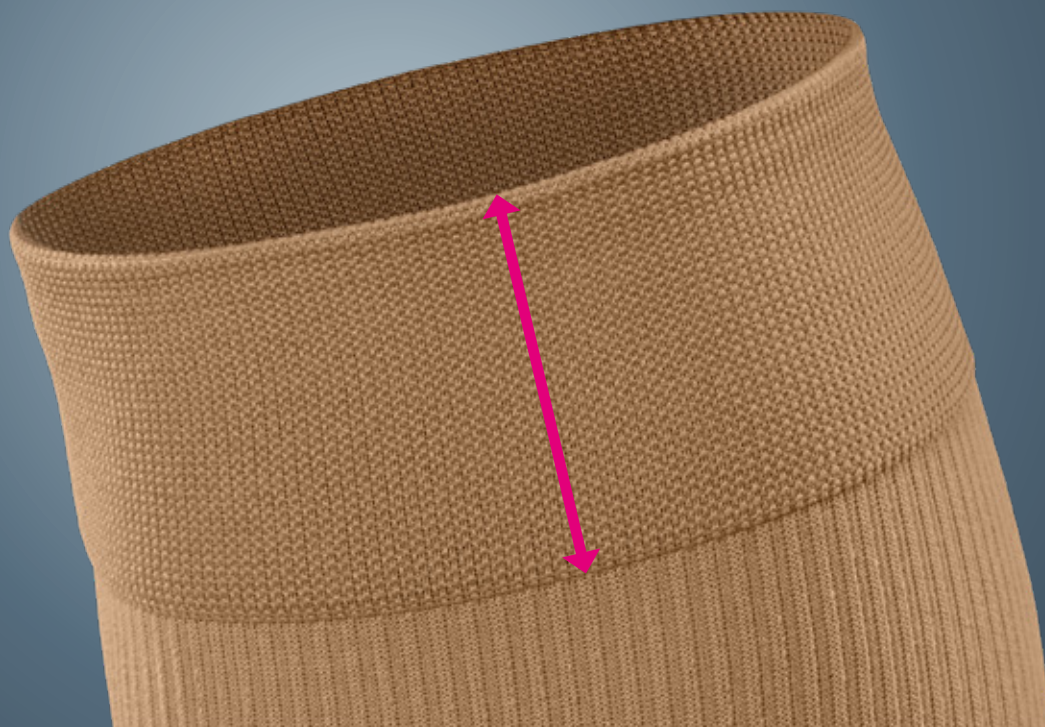

mediven® angio

Bezpieczna terapia – aż po czubki palców.

Wskazówka od medi¹

Uwzględniając cechy produktu i wyniki badania klinicznego², polecamy mediven angio:

- kobietom / mężczyznom cierpiącym na przewlekłą niewydolność żylną
- osobom ze współistniejącą chorobą tętnic obwodowych (PAD) o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego
- osobom ze współistniejącą cukrzycą

Wskazania³


- Przewlekłe choroby żyłne, poziomy I do III wg klasyfikacji Widmera lub C0s-C5 wg CEAP

mediven angio				
Style	AD	AD	AD pte.	AD pte.
				
	łydka krótka stopa	łydka długa stopa	łydka drobna krótka stopa	łydka drobna długa stopa
CCL 1	3X40Δ11-7	3X40Δ21-7	3X47Δ11-7	3X47Δ21-7
CCL 2	3Y40Δ11-7	3Y40Δ21-7	3Y47Δ11-7	3Y47Δ21-7

Δ = Należy dodać 1 dla koloru karmelowego i 5 dla koloru czarnego

Rozmiar należy dobrać na podstawie ostatniej cyfry numeru artykułu, od 1 do 7.

Tabela rozmiarów

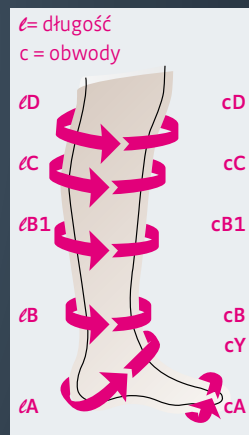

Standardowe rozmiary		I	II	III	IV	V	VI	VII
Obwody w cm	cD	27 – 33	29 – 36	32 – 39	34 – 42	36 – 45	38 – 48	40 – 50
	cC	28 – 34	30 – 37	33 – 40	35 – 43	37 – 46	39 – 49	41 – 51
	cB1	23 – 27	24 – 29	26 – 32	29 – 35	31 – 37	33 – 39	35 – 41
	cB	18 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30	30 – 32
	cY	26 – 31	28 – 33	29 – 35	31 – 37	32 – 38	33 – 40	34 – 42
	cA	17 – 22	19 – 24	21 – 26	23 – 29	25 – 32	27 – 34	28 – 35
Długość	Długość produktu							
	lD normalna	39 – 44 cm						
	lD krótka	34 – 38 cm						

Materiał

Medium

Klasy kompresji

CCL 1, 2

Standardowe kolory

S = Standard

M = Made-to-measure (na miarę)*

Karmelowe
S + M

Czarne
S + M

* Dostawa do
10 dni roboczych.

Długość stopy	
krótka stopa	zamknięte palce, do 25 cm $\hat{=}$ rozmiary obuwia 36-40
długa stopa	zamknięte palce, od 25 cm $\hat{=}$ rozmiary obuwia 40-46

¹ Warto pamiętać, że ta rekomendacja nie zastępuje diagnozy lekarskiej lub profesjonalnej porady sprzedawcy specjalistycznego asortymentu medycznego.

² Rother U et al. Safety of medical compression stockings in patients with diabetes mellitus or peripheral arterial disease. BMJ Open Diab Res Care 2020;8:e001316.

³ Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Dokument dostępny na stronie: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (ostatnie zmiany 09.12.2020)

Przeznaczenie mediven angio: medyczne podkolanówki uciskowe działane na okrągło, przeznaczone do kompresji dolnych kończyn, głównie do leczenia schorzeń układu żylnego.

Sygnalizator terapeutyczny medi

Dla prostego, bezpiecznego leczenia, dostosowanego do wskazań.

Krok 1: Określenie wskazań i ocena problemów współistniejących

Krok 2: Uwzględnienie kryteriów i problemów współistniejących specyficznych dla danego pacjenta



Przewlekła niewydolność żylna
(CEAP C0s – C5)

ok. 98 % osób powyżej 60 roku życia¹



Terapia uciskowa z
mediven® round knit
(np. mediven plus) –
leczenie indywidualne



Przewlekła niewydolność żylna
(CEAP C0s – C5) oraz choroba
tętnic obwodowych (PAD) o
nasileniu do łagodnego do
umiarkowanego

ok. 21 % osób powyżej 65 roku życia²

Przewlekła niewydolność żylna
(CEAP C0s – C5) i cukrzyca typu 2 /
polineuropatia cukrzycowa

ok. 20,5 % osób powyżej 60 roku życia⁴



Terapia uciskowa z
mediven® angio – unikatowa i bezpieczna



Unikatowy produkt

- Mikroplusz z wełny merynosa wokół całej stopy
- Mocna, prążkowana struktura
- Wyjątkowo długi, płaski szew



Badanie kliniczne

- Stabilne krążenie krwi, aż po najmniejsze naczynia
- Bez uszkodzeń skóry
- Bez marszczenia i zwijania
- Bez ucisku punktowego
- Wysoki komfort noszenia

Potwierdzono dla kompresji klasy 1 i 2



Przewlekła niewydolność żylna
i choroba tętnic obwodowych
o nasileniu ciężkim

Przewlekła niewydolność żylna
i zespół stopy cukrzycowej



Przeciwwskazanie
do terapii kompresyjnej³



Wykluczone leczenie
medycznymi pończochami uciskowymi



¹ Rabe E et al. Bonner Venenstudie der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie. Phlebologie 2003;32:1–14.

² Lawall H et al. S3-Leitlinie zur Diagnostik, Therapie und Nachsorge der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit. Dokument dostępny na stronie: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/065-003.html> (ostatnie zmiany 09.12.2020)

³ Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Dokument dostępny na stronie: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (ostatnie zmiany 09.12.2020).

⁴ Bericht der nationalen Diabetes-Surveillance 2019. Diabetes in Deutschland. Robert Koch-Institut.

⁵ Rother U et al. Safety of medical compression stockings in patients with diabetes mellitus or peripheral arterial disease. BMJ Open Diab Res Care 2020;8:e001316.



Czy wiesz?

Badania
udowodniły:

**Przyrządy
wspomagające
zakładanie**

znacząco zwiększają
skuteczność!*

* Sippel K et al. Donning devices (foot slips and frames) enable elderly people with severe chronic venous insufficiency to put on compression stockings. Eur J Vasc Endovasc Surg 2015;49:221-229

medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
Niemcy
T: +49 921 912-0
F: +49 921 912-781
export@medi.de
www.medi.biz/angio

0000000/ 02.2021